

## Relax and Tone

Массаж, тонизирование и расслабление

### Технические характеристики товара

Название модели- Relax and Tone  
Номер модели-BJ-9789  
Потребление энергии-максимально 25 Вт  
Вес -1 кг

### Изготовлено из:

-покрытие (ABS)  
-верхняя крышка (PC)  
-ручка (TPR)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы правильно и эффективно использовать устройство.**

#### Инструкция

1. Вставить/ поменять насадку

Удалить крышку с ячейками (шаг 1),

Нажмите на вогнутые части на вращающемся основании и поднимите надетую насадку (шаг 2).

Вставьте другую насадку и присоедините крышку с ячейками при необходимости

2. Включите вилку в розетку


3. Поверните рычаг включения по часовой стрелке, чтобы прибор включился, продолжайте поворачивать в том же направлении, чтобы прибор работал быстрее. Поворачивайте против часовой стрелки, чтобы прибор работал медленнее.

4. Для достижения наиболее удобной и эффективной работы можно держать устройство двумя способами:

- держите прибор по центру (шаг 3),

- держите прибор за ручку (шаг 4),

5. После использования, поверните диск против часовой стрелки до упора (диск станет в положение OFF), затем выньте вилку из розетки.

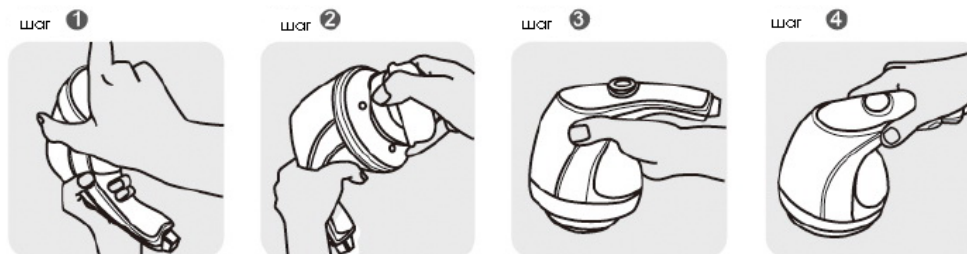

### Свойства товара

- портативный и легкий
- нарастающая регулировка скорости
- высокая скорость вращения 2500 вращений в минуту
- удобная мягкая резиновая ручка
- 4 насадки для различного использования
- придает мышцам тонус и снимает напряжение

### Техническое обслуживание и хранение

- всегда выключайте прибор из розетки, если Вы им не пользуетесь
- прибор нельзя мочить или подвергать воздействию воды
- не поднимайте прибор, держа за шнур
- протирайте прибор мягкой тканью и нейтральным моющим средством

### Внимание

- не используйте прибор, если Вы беременны, у Вас больное сердце, Вы страдаете от физических травм, перед использованием проконсультируйтесь с терапевтом, если Вы не уверены, можно ли Вам пользоваться этим прибором.
- пользуйтесь прибором только через час после приема пищи

- храните прибор в недоступном для детей месте
- не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут
- не используйте прибор для головы
- не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37°C или 100°F.
- если во время использования прибора Вы испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и немедленно обратитесь к врачу.

### Внимание

Защитную насадку можно использовать только с рифленной или плоской насадкой. Никогда не используйте защитную насадку с роликовыми или шлифовальными насадками.

Не используйте прибор без защитной насадки в тех местах, где волосы могут попасть в прибор (шея или плечи).



используйте защитную насадку, чтобы не повредить волосы



неправильное использование прибора

### На каких местах можно пользоваться прибором

Предплечья (придаем тонус мышцам верхней части руки)

Плечи (облегчает напряжение, возникающее в шее и спине)

Брюшной пресс (тонизирует мышцы брюшного пресса- у Вас становится более стройная талия)

Бедра (придает тонус мышцам брюшного пресса и ягодичным мышцам)

Верхняя часть бедра (снимает напряжение мышц бедра и делает ноги более стройными)

Игры (помогает расслабиться ноющим мышцам ног)

Ступни (удаляет мозоли и жесткую кожу)



### Детали и назначение деталей

1. Рычаг включения прибора
2. Защитная насадка
3. Шлифовальная насадка (для ног)
4. Шариковая насадка
5. Плоская насадка
6. насадка с волнистой поверхностью



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

<p><b>Наименование Товара:</b> Релакс энд Тон</p> <p><b>Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:</b> 14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар надлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар.</p> <p><b>Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества:</b> 90 (Девяносто) дней. В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар.</p> <p>90 (Девяносто) дней В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего качества и получить взамен такой же Товар надлежащего качества без перерасчета цены.</p> <p><b>Продавец:</b> Общество с ограниченной ответственностью «Студия Модерна» (ОГРН 1037739431784).</p> <p><b>Адрес, по которому осуществляется замена Товара*:</b> Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-ая Останкинская, дом 55, Торговый Центр Останкино, зал В, павильон 2.</p> <p><b>Режим работы отдела Продавца по возврату товара:</b> по рабочим дням с 11.00 до 16.00.</p> <p><b>Контактный телефон Продавца:</b> (495) 737-82-32. *Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ осуществляется по почте.</p>	<p><b>Дата продажи Товара:</b> определяется моментом оплаты и передачи Товара.</p> <p><b>Номер посылки либо счета**:</b> _____</p> <p><b>Подпись представителя Продавца:</b> _____</p> <p><b>Покупатель:</b> _____</p> <p><b>Адрес/Тел. Покупателя:</b> _____</p> <p>_____</p> <p><b>Покупатель с условиями гарантийного обязательства ознакомлен и согласен</b></p> <p><b>Подпись Покупателя:</b> _____</p> <p><b>Незаполненный полностью настоящий гарантийный талон недействителен.</b></p> <p><b>**Номер посылки или счета находится в сопутствующих документах.</b></p>
--	--

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

<p><b>Условия гарантийного обязательства:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, приобретенный только непосредственно у организации, указанной в настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец);</li> <li>2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу (потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;</li> <li>3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу (потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне;</li> <li>4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах гарантийного срока, указанного в настоящем талоне;</li> <li>5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара;</li> <li>6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному в настоящем талоне;</li> <li>7) доставка Товара для замены и получение нового Товара осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет;</li> <li>8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;</li> <li>9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу заполненный полностью настоящий гарантийный талон;</li> <li>10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца;</li> <li>11) обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.</li> <li>12) перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец вправе провести проверку качества Товара;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в день предъявления Товара при условии согласования с ним дня замены Товара и наличия соответствующего Товара на складе;</li> <li>14) возврат денег осуществляется, как правило, в день возврата Товара при условии согласования с Продавцом дня возврата Товара;</li> <li>15) при отказе Продавца от замены Товара или возврата денег на условиях настоящего гарантийного обязательства потребитель обязан получить у Продавца отметку об отказе в замене с указанием ее причины. Только наличие на настоящем талоне такой отметки (с указанием должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи и печати Продавца) свидетельствует о несоблюдении Продавцом добровольного порядка удовлетворения требований потребителя;</li> <li>16) гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части Товара считаются равными гарантийному сроку на Товар;</li> <li>17) для некоторых товаров правила и условия возврата указываются отдельным документом, передаваемым вместе с товаром. В этом случае настоящие гарантийные обязательства действуют в части, не противоречащей такому документу.</li> </ol> <p>В замене отказано по причине _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.) _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p align="center">_____ (подпись) _____ (дата)</p> <p>М.П.</p>
--	---